

Инструкция по использованию

«Наконечник, тип Finland»

1. Введение


Наконечник (тип Finland), является одним из самых необходимых пластиковых расходных материалов. Наконечник используется для дозирования небольших объемов жидкостей, а также переноса и перемешивания жидких образцов.

2. Предназначение

Наконечники, типа Finland предназначены для высокоточного дозирования и пипетирования различных жидкостей с помощью автоматических дозаторов и роботизированных систем.

3. Описание

Наконечники для дозаторов должны быть ровными, иметь гладкую без механических повреждений поверхность и отсутствие облома на конце наконечника, из которого выходит доза.

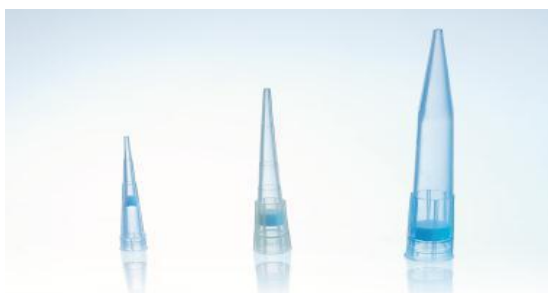

Наконечник, тип Finland изготовлен из высококачественного полипропилена (PP), преимущества материала:

- Не обладает теплопроводностью;
- Не вступает в реакцию с продуктами и другими средами;
- Устойчив к моющим и дезинфицирующим средствам;
- Имеет незначительный вес, но выдерживает значительные нагрузки.

Не рекомендуется подвергать наконечники к автоклавированию. Максимальная температура 110 °С.

Наконечник, тип Finland подходит для дозаторов **Biohit, Finnpipette**.

3.1 Размер

Наименование	Артикул	Размер	Объем
Наконечник, тип Finland	E1015	6*50 мм	10-200 мкл
Наконечник, тип Finland	E1016	6*52 мм	10-250 мкл
Наконечник, тип Finland	E1017	8*71 мм	200-1000 мкл

4. Меры предосторожности

- Наконечник используется совместно с автоматическим дозатором;
- При работе с опасными и токсичными растворами, соблюдайте меры предосторожности;
- Избегайте большой разницы в температурах между дозатором и наконечником во избежание ошибок в отбираемом объеме;
- Не используйте изделие, если наконечник поврежден;
- Не используйте изделие, если внутри них присутствует постороннее вещество;
- Не используйте изделие по истечении срока годности;
- Не используйте изделие не по назначению.

Утилизация в соответствии с действующими нормами.

5. Транспортная упаковка

Наименование	Артикул	Размер	Объем	Упаковка, шт
Наконечник, тип Finland	E1015	6*50 мм	10-200 мкл	1000*30
Наконечник, тип Finland	E1016	6*52 мм	10-250 мкл	1000*25
Наконечник, тип Finland	E1017	8*71 мм	200-1000 мкл	500*20

6. Условия хранения

Хранение наконечников производится в упаковке предприятия изготовителя в сухом прохладном месте. Избегать значительных колебаний температуры во время хранения.

7. Гарантия производителя

Гарантийный срок хранения наконечника, типа Finland-5 лет с даты изготовления (с соблюдением условий хранения).

8. Документ, подтверждающий регистрацию МИ

Регистрационное удостоверение РЗН 2013/921 от 25.05.2018 года на медицинское изделие: «Медицинские расходные материалы из полимерного материала для лаборатории».

Производитель:

Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd.

Адрес: No. 10 Beiyuan Ave., Huangyan 318020 Taizhou, Zhejiang, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, телефон: 576-84081111, факс: 576-84050789.

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Инфора»

Адрес: 690002, Приморский край, г. Владивосток, Проспект Острякова д.8, кв.29, телефон: 8 (423) 230-20-39.